



Lack B eco

Gebrauchsanleitung



Produktbeschreibung:

Luftfeuchtigkeitshärtender Silikon-Lack für Silikon-Otoplastiken (Biopor®) oder alle Silikon-Abdrücke (auch aus Otoform®); aber auch geeignet als Haftbeschichtung bei Acryl-Otoplastiken (vorher mit Glusil grundieren).

Die ausgehärtete Beschichtung besitzt ein brillant glänzendes und klar-transparentes Aussehen, die Oberfläche ist pflegeleicht. Der Verbund zwischen der Silikon-Otoplastik und dem ausgehärteten Lack B eco ist ausgezeichnet, die Beschichtung ist sehr robust und langlebig.

Verarbeitung:

Lack B eco mit einem Pinsel dünn auf die saubere und entfettete (mit feuchtem Ledertuch abreiben) Otoplastik auftragen oder die gesamte Otoplastik tauchen. Für Haftbeschichtung Acryl-Otoplastik mit Glusil (REF 076) bепinseln. Aushärtezeit: ca. 10 Minuten, dann mit Lack B eco lackieren, Aushärtezeit an der Luft: ca. 15 - 20 Minuten. Bei der Verarbeitung eine geeignete Absauganlage verwenden.

Aushärtung: ca. 15 - 20 Minuten an der Luft (bei 23 °C ± 1 °C, 50 % - 60 % RLF)

Lagerung: gut verschlossen bei Raumtemperatur

Verdünnung: mit Verdünnung für Lack B eco und Lack B matt (REF 0817)

REF 0811 - 20 ml Flasche / **0812** - 50 ml Flasche / **0813** - 250 ml Flasche

Achtung: Eine frisch lackierte Otoplastik sollte frühestens nach 30 Minuten in das Ohr gesetzt werden! Tiefe Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verzögern die Aushärtezeit des Lackes!

Mögliche Gefahren

Beachten Sie bei der Benutzung von Lack B eco das Sicherheitsdatenblatt.


Gefahrenhinweise	Sicherheitshinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.	P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
H315 Verursacht Hautreizungen.	P241 Explosionssgeschützte elektrische Geräte /Lüftungsanlagen/ Beleuchtungsanlagen verwenden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.	P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.	P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
	P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
	P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Enthält Diocetylzinnacetylacetonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Chargennummer / Haltbarkeitsdatum: Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich auf jeder Lack B eco Verpackung. Bei Beanstandungen des Produktes bitte immer die Chargennummer des Produktes angeben. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums.

Die Dreve Otoplastik GmbH haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung des Materials hervorgerufen werden.

2020-01-10 / Rev. 2
Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna / Germany
Tel.: + 49 2303 8807-0 • Fax: + 49 2303 82909
E-Mail: otoplastik@dreve.de • Internet: www.dreve.com

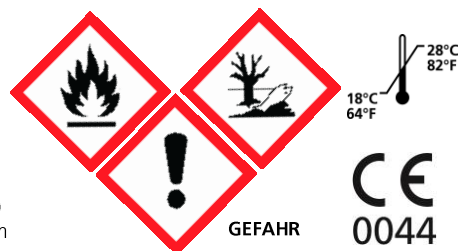

Lacquer B eco

Directions for use



Product Description:

A silicone lacquer for silicone earmolds (Biopor®) or all silicone impressions (also made of Otoform®) which cures in the air; also suited as an adhesive coating for acrylic earmolds (treat with Glusil in advance).

The cured coating has a brilliantly shiny and clear-transparent appearance, the surface is easy to clean. The bond between the silicone earmold and the layer of the Lacquer B eco is excellent, the coating is very durable and long lasting.

Processing:

Apply Lacquer B eco with a brush onto the clean earmold (wipe off grease with a moist leather cloth) or dip the whole earmold into it. For an adhesive coating apply Glusil (REF 076) on the acrylic earmold. Curing time: approx. 10 minutes, then treat with Lacquer B eco, curing time in the air: approx. 15 - 20 minutes. Please use a suitable suction device during the processing.

Curing:

Exposed to air; approx. 15 - 20 minutes (at 23 °C ± 1 °C, 50 % - 60 % RH)

Storage:

Keep bottle well-sealed at room temperature

Dilution:

with diluting agent for Lacquer B eco and Lacquer B mat (REF 0817)

REF

0811 - 20 ml bottle / **0812** - 50 ml bottle / **0813** - 250 ml bottle

Attention:

Insert a just lacquered earmold into the ear not before 30 minutes!

Low temperatures and low humidity delay the curing time of the lacquer!

Possible dangers:

Before use observe the Material Safety Data Sheet of Lacquer B eco.

Hazard statements

H225 Highly flammable liquid and vapour.
H315 Causes skin irritation.
H319 Causes serious eye irritation.
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P241 Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P501 Dispose of contents/container in accordance with local / regional / national/international regulations.

Contains Diocetylzinnacetylacetonate. May produce an allergic reaction.

Lot number / Best before date: The lot number and the best before date are indicated on each Lack B eco packaging. In case of claims please always indicate the lot number of the product. Do not use the product after expiry of the best before date.

Dreve Otoplastik GmbH is not liable for any damages caused by improper application of the material.

2020-01-10 / Rev. 2
Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna / Germany
Tel.: + 49 2303 8807-0 • Fax: + 49 2303 82909
E-Mail: otoplastik@dreve.de • Internet: www.dreve.com

